



SmartDrive™

Die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Rollstuhl-Antriebssystems eröffnet Dir neue Möglichkeiten der Fortbewegung.

Anschieben und Bremsen erfolgt über die Greifreifen. Die neue intuitive Steuerung mit Bluetooth LE 4.0 Schnittstelle erlaubt es Dir, jederzeit anzufahren, oder anzuhalten. Mit den neuen Funktionen und Einstellmöglichkeiten kannst Du den SmartDrive perfekt an Deine Wünsche anpassen.

- › Pushtracker Armband und Smartphone App*
- › Anschieben (lassen) um loszufahren, Bremsen um anzuhalten
- › Bewältigt Steigungen bis zu 18%
- › Gesamtgewicht 6,1 kg
- › Einfache Montage

* App für iOS und Android

**Geeignet für jeden Aktivrollstuhl -
ob Starrahmen oder Faltrollstuhl**



MaxMobility GmbH

Postfach 100021 • D-72421 Albstadt

Tel.: +49 (0) 7431 - 93 913 - 0

E-Mail: info@maxmobility.de

WWW.MAXMOBILITY.DE

v1/2017



SmartDrive™

The coolest
thing in your
world



SmartDrive

Die Weiterentwicklung eines revolutionären
neuen Antriebssystems

SmartDriveTM



> NEUE STEUERUNG

Die neue Steuerung, den Pushtracker, trägst Du wie eine Uhr am Handgelenk. Auf Wunsch vieler Nutzer haben wir auch Funktionen aus älteren SmartDrive Versionen in die neue Steuerung integriert.

Diese Funktionen kannst Du bei Bedarf auswählen:

MX1 - Anschieben, um loszufahren. Über die Greifreifen bremsen, um anzuhalten. Gut geeignet für den Innenbereich.

MX2 - Anschieben, um loszufahren. Mit der Hand, an der sich das Pushtracker-Armband befindet, leicht an den Greifreifen klopfen, um den Motor zu unterbrechen. Dann mit den Greifreifen bremsen. Gut geeignet für den Innen- und Aussenbereich.

MX2+ - Zweimal leicht mit der Hand, an der sich das Pushtracker-Armband befindet, an den Greifreifen klopfen um automatisch loszufahren. Dann einmal klopfen, um die Geschwindigkeit zu halten und zweimal klopfen, um über die Greifreifen zu bremsen. Die optimale Lösung für noch mehr Unterstützung.

> LEISTUNGSSTARK

SmartDrive ist sehr leistungsstark. Steigungen und Gehwege kannst Du jetzt ganz leicht befahren. Dicke Teppiche und kleine Unebenheiten sind für Dich kein Problem mehr.

SmartDrive verfügt sogar über ein Rückhaltesystem. Diese Funktion erlaubt Dir, an Steigungen anzuhalten, ohne zurückzurollen, um dann einfach weiterzufahren.

> LEICHTGEWICHT

SmartDrive ist jetzt noch leichter. Da sich sämtliche Komponenten im Motorgehäuse befinden, wird Dein Rollstuhl nicht mit zusätzlichem Gewicht belastet. Das Gesamtgewicht von nur 6,1 kg macht den SmartDrive im täglichen Gebrauch und auf Reisen noch flexibler.


> ANPASSBAR

Der Pushtracker ermöglicht Dir, Deinen SmartDrive individuell zu konfigurieren. Einstellen der Bewegungsempfindlichkeit, Höchstgeschwindigkeit und vieles mehr, machen Dich noch aktiver.

> EINFACHE MONTAGE

SmartDrive lässt sich ganz einfach an fast alle Rollstuhlmodelle anbringen. An Starrahmen mit der optional erhältlichen Achsrohrklemme – an Faltrollstühlen mit der abnehmbaren Universalachse (Option). Es sind keine weiteren Teile notwendig.

Erfahre mehr auf www.maxmobility.de

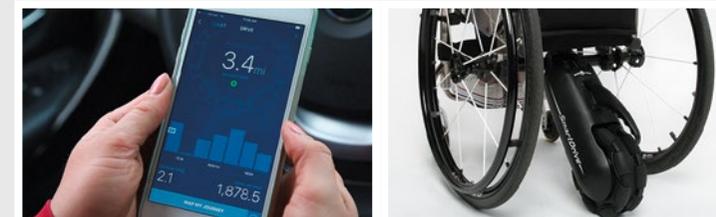

Anerkanntes Hilfsmittel

Wheelies möglich



8,9*
km/h

in 5 Min.
fertig montiert

250 Watt
0,34 PS

nur 6,1
kg Gesamtgewicht

Lithium-Ionen-
Eisen-Phosphat-
Akku

Bordsteinkanten
KEIN PROBLEM!

* SmartDrive wird ab Werk mit einer Begrenzung auf 6 km/h ausgeliefert.